

FIG. 1

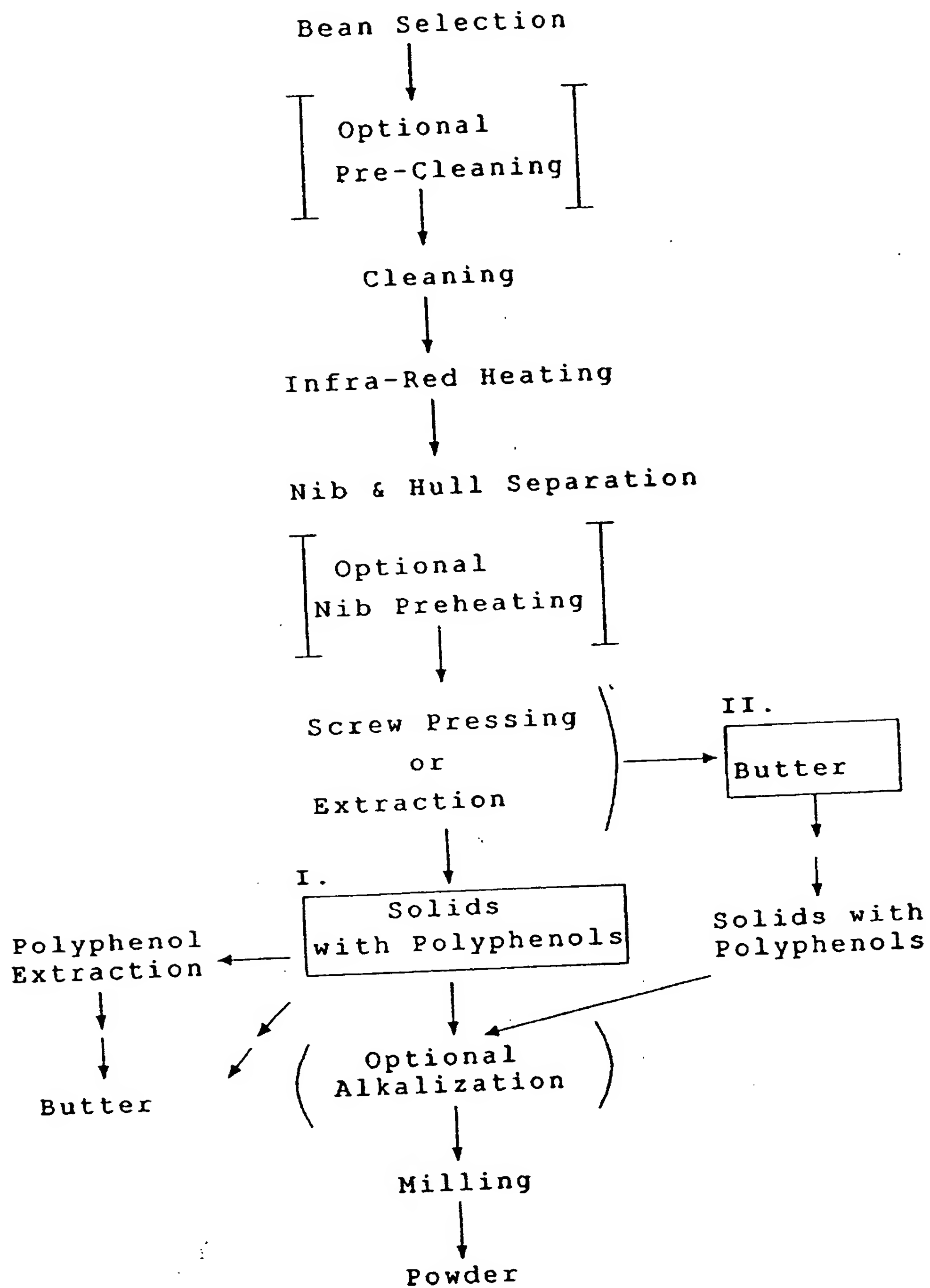


FIG. 2A

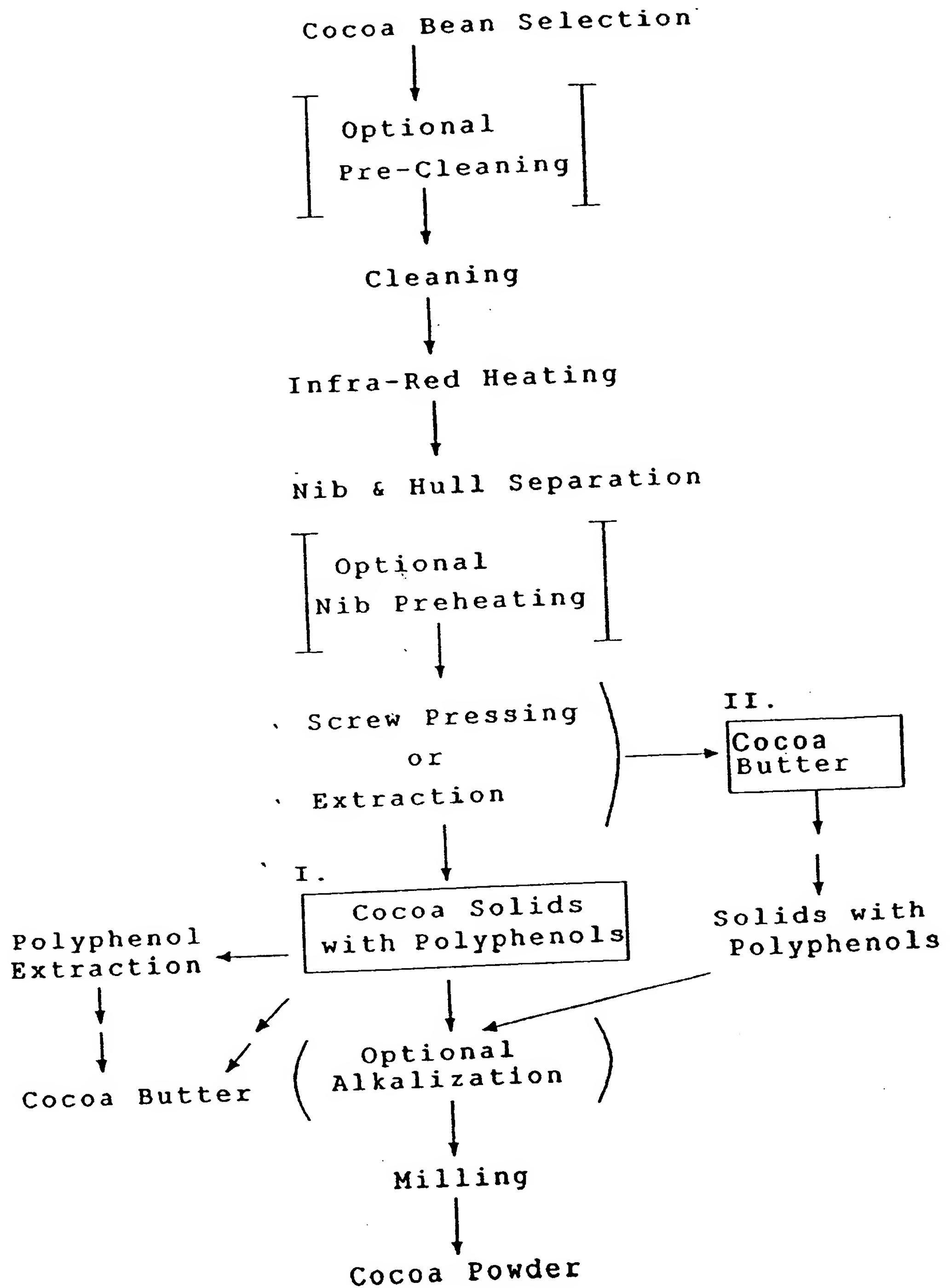


FIG. 2B

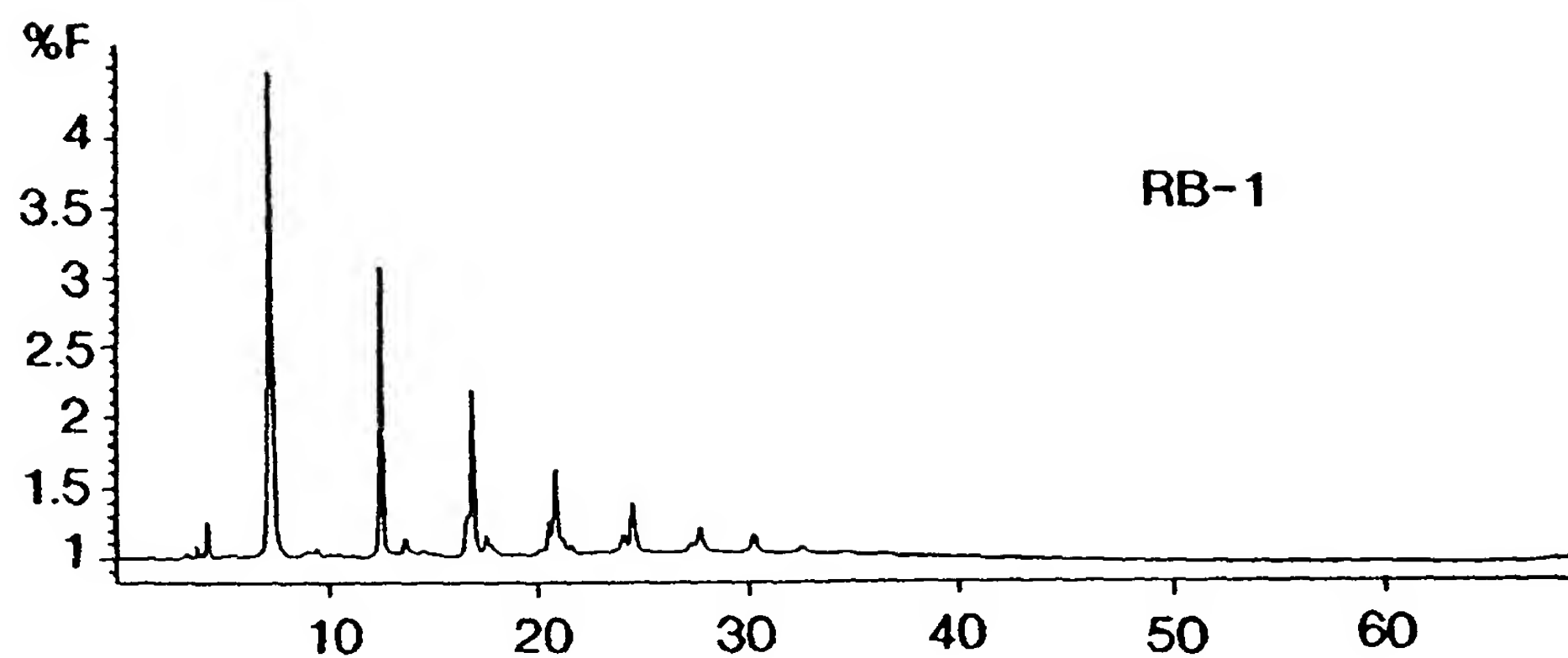


FIG. 3A

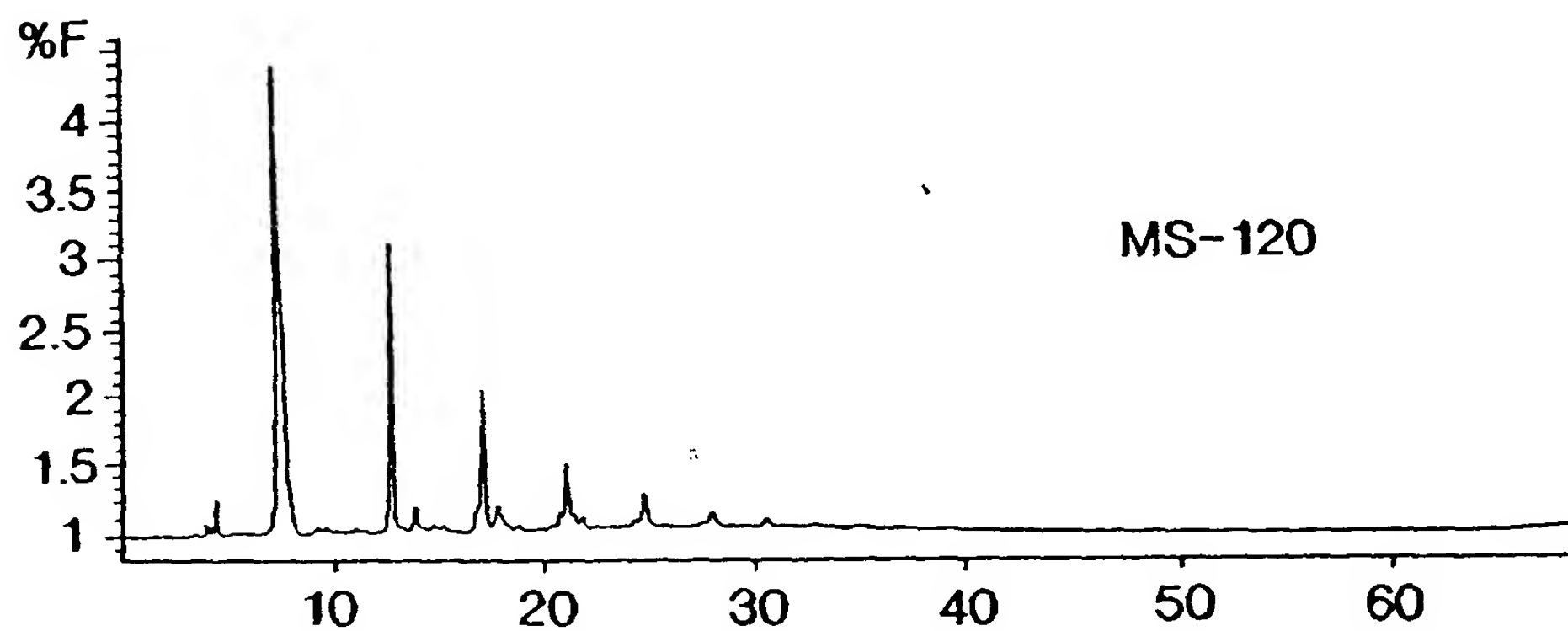


FIG. 3B

Column: Supelcosil LC-SI 4.6mm X 250mm, 5mm

Detector: FLD, Ex=276 Em=316

Column Temperature: 37°C

Mobile Phase: A-Methylene Chloride B-Methanol C-50/50 H₂O/HOAc

Flow Rate: 1 ml/min

Gradient:	Time	%A	%B	%C
	0	82	14	4
	30	67.6	28.4	4
	60	46	50	4

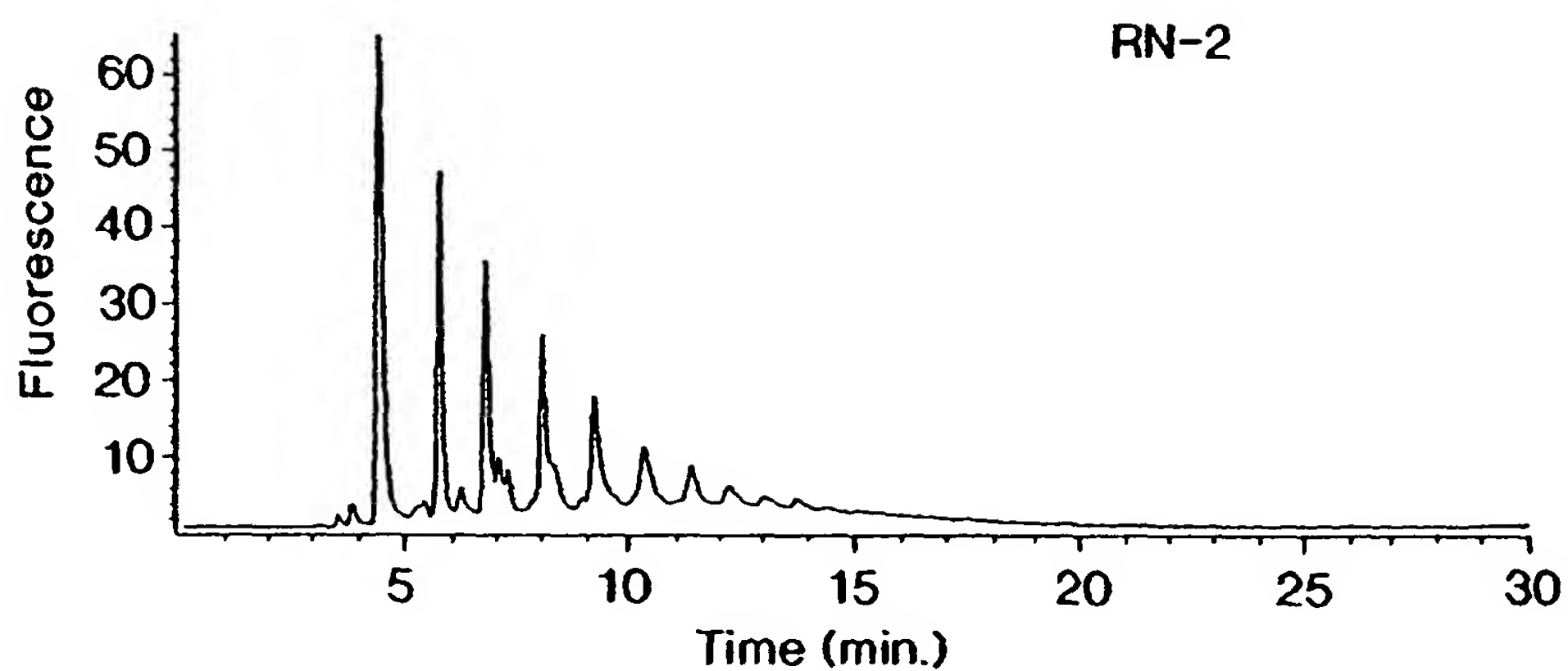


FIG. 4A

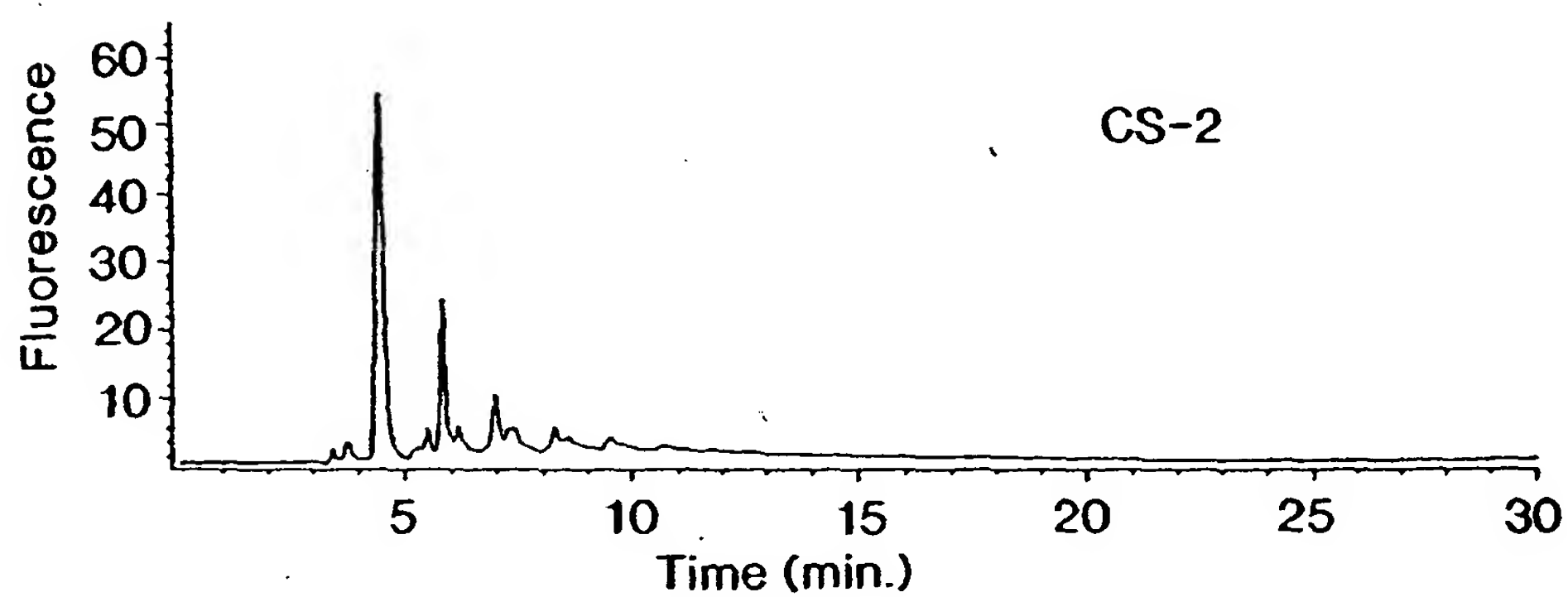


FIG. 4B

Column: Supelcosil LC-SI 4.6mm X 250mm, 5mm

Detector: FLD, Ex=276 Em=316

Column Temperature: 37°C

Mobile Phase: A-Methylene Chloride B-Methanol C-50/50 H₂O/HOAc

Flow Rate: 1 ml/min

Gradient:	Time	%A	%B	%C
	0	76	20	4
	25	46	50	4
	30	10	86	4